


INSTRUCTIE BLOED TEST

Dit is een betrouwbare test voor syfilis en HIV


Lees de instructies goed door. Het is niet moeilijk, maar doe wel precies wat er staat. Zo voorkom je fouten tijdens de afname en het verzenden van het materiaal naar het laboratorium.



1. Leg het bloedbuisje, de prikker, en de reserveprikker klaar op een schone ondergrond. Maak het buisje open door het roze dopje er van af te halen.

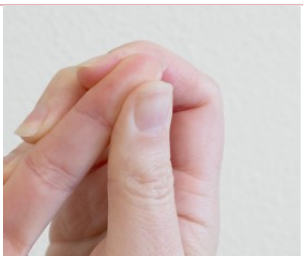

2. Was je handen met warm water en zeep. Als je koude handen hebt, maak deze dan eerst warm in warm water. Masseer het bloed enkele tellen omhoog naar de top van je middelvinger.

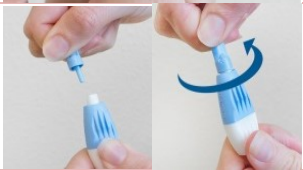

3. Pak de prikker, draai het dopje eraf.



4. Leg je hand met de rug naar beneden op tafel. Druk de prikker stevig tegen de zijkant van het topje van je vinger, bij voorkeur je middelvinger.



5. Je zou nu een klik moeten horen. De prik volgt direct. Haal de prikker niet weg, totdat je deze klik gehoord hebt.



6. Volgt er niet meteen een druppel bloed, stuw dan met je andere hand zoveel mogelijk bloed naar de vingertop, en in het buisje. Vul het buisje **tot het streepje waar 500 staat**.



7. Druk de dop terug op het buisje totdat je een klik hoort. Stop het buisje in de plastic safetybag.

Let op! Sluit de safetybag pas als alle testen er in zitten.